


## Allgemeine Beschreibung

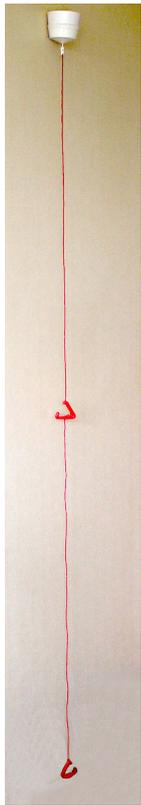

Zugtaster zur Auslösung eines Notrufs durch Zugbetätigung. Wenn an der Zugschnur gezogen wird, sendet er ein Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.

Der Funk-Zugtaster kann mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall sowie dem CareAssist verwendet werden.

Die Funkreichweite ist abhängig von der Gebäudestruktur und beträgt in Verbindung mit diesen Notrufgeräten bis zu 50 m.

Einfache Installation; der Montageort kann problemlos gewechselt werden.

Der Funk-Zugtaster besteht aus einem Kunststoffgehäuse und der Zugschnur mit zwei Zuggriffen.

Bevor der Funk-Zugtaster benutzt werden kann, muss er programmiert und installiert werden. Dieses erledigt ein Techniker. Dieser sollte dem Benutzer anschließend die Bedienung des Funk-Zugtasters erklären.

## Programmieren

Befolgen Sie die Programmieranweisungen in der Dokumentation zu dem Notrufgerät. Um den Zugtaster für die Zuordnung auszulösen, ziehen Sie an der Zugschnur. Nach der Programmierung führen Sie einen Testruf aus, um sicherzustellen, dass ein Notruf ausgelöst wird.

## Installation

### Wählen Sie den Installationsort für den Funk-Zugtaster

- dort, wo er am ehesten benötigt wird, z.B. Schlafzimmer, Küche, Bad.
- nicht an oder neben Metall oder einer metallischen Oberfläche. Dadurch würde die Funkreichweite beeinträchtigt.
- nicht in der Nähe von anderen Zugkordeln (z.B. Lichtschalter).
- nicht in einer Umgebung, die nass oder feucht werden könnte. Das ist besonders bei der Installation im Bad zu beachten.

Bevor Sie den Zugtaster befestigen, müssen Sie testen, ob das Funksignal von dem gewählten Ort das Notrufgerät erreicht.

### Deckenmontage

Installieren Sie den Funk-Zugtaster an der Decke, indem Sie die mitgelieferte Grundplatte verwenden. Der Zugtaster muss sicher befestigt werden, so dass er sich nicht bewegen oder wackeln kann, wenn an der Zugschnur gezogen wird.

## Batterie

Der Zugtaster enthält eine 3 V-Lithiumknopfzelle. Die Lebensdauer dieser Batterie beträgt ca. 20.000 Auslösungen über 3 Jahre.

Wenn die Batterie schwach ist, sendet der Funk-Zugtaster ein spezielles Signal an das zugehörigen Notrufgerät. Das Notrufgerät informiert den Notrufempfänger über die schwache Batterie. Wie diese Information erfolgt, hängt von dem Notrufgerät ab. Entnehmen Sie der Dokumentation zu dem Notrufgerät, wie die Information über die schwache Batterie erfolgt.

Der Funk-Zugtaster muss umgehend zum Austausch der Batterie zum Tunstall-Werk eingeschickt werden.

## Technische Daten

Abmessungen des Kunststoffgehäuses:	Höhe: 75 mm Ø: 85 mm
Länge der Zugschnur	2,5 m
Batterie	3 V DC Lithium-Knopfzelle (kann nur von Tunstall gewechselt werden)
Lebensdauer der Batterie	ca. 3 Jahre, bis zu 20000 Auslösungen unter normalen Bedingungen
Funkfrequenz	869,2125 MHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung	< 1 mW effektiv abgestrahlte Leistung
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +55 °C

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Tunstall Healthcare (UK) Ltd, dass der Funk-Zugtaster den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.tunstall.co.uk/approvals](http://www.tunstall.co.uk/approvals)

