



## Anzeige- und Bedienelemente

### Sensorkopf

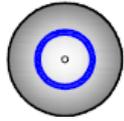

Findelicht

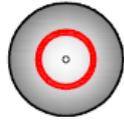

Rufanzeige

### Sensorsystem

#### LED-Anzeigen

Betrieb

Umgebungsgeräusch

Ruf


Magnetschlüssel  
Pflegermodus





#### Einstellregler

Umgebungsgeräusch

Findelicht

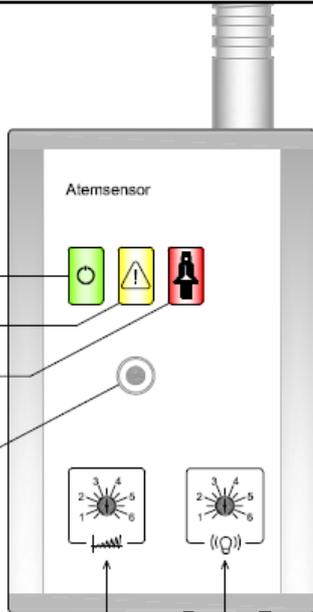

## Atemsensor positionieren und montieren

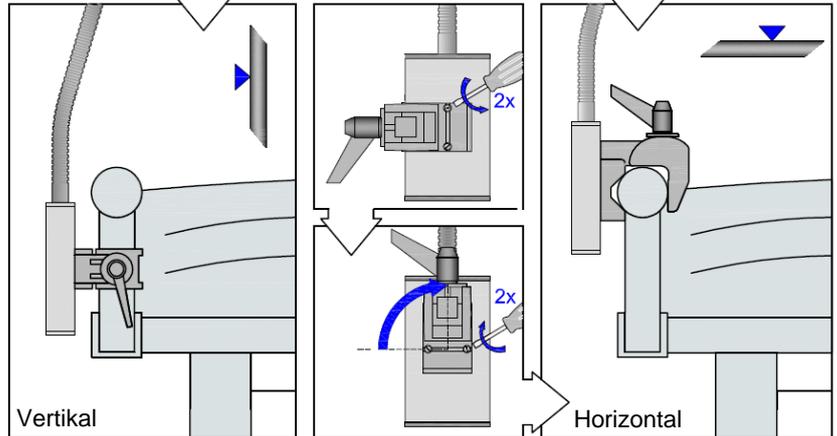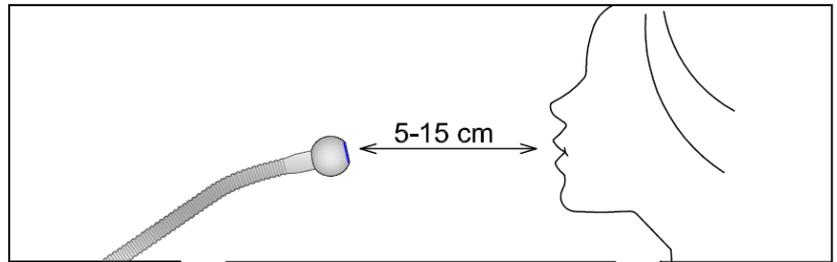


## Anschluss

a) SUB-D-Stecker einstecken und Sicherungsstifte eindrehen


b) Steckernetzteil einstecken

c) Betriebsanzeige muss grün leuchten

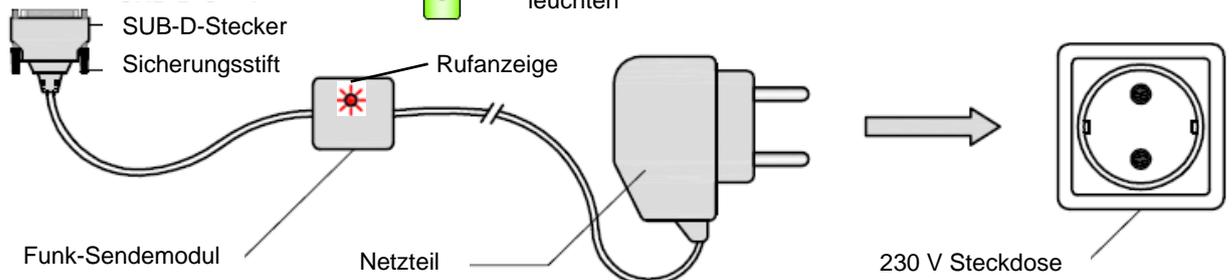

## Einlernen des Atemsensors an einen Empfänger

Zum Einlernen des Atemsensors muss ein Ruf ausgelöst werden.

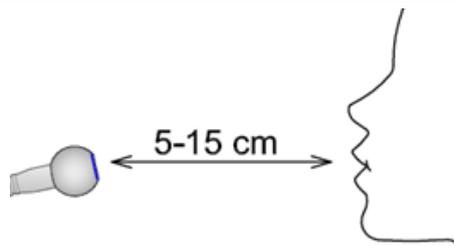

Der Empfänger muss sich im Einlernmodus befinden.

Die genaue Beschreibung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Empfänger-Bedienungsanleitung.



Diese Anleitung gibt in Kurzform Auskunft zur Inbetriebnahme und Gebrauch des Atemsensors. Sie ersetzt nicht das Durchlesen der vollständigen Bedienungsanleitung!



see the future