



Wisbi®

Bedienungsanleitung User manual Mode d'emploi

Wisbi Home - WW1901

www.TEXIBLE.com

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch! Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernimmt die TEXIBLE GmbH keine Haftung!

TEXIBLE Wisbi® ist kein medizinisches Gerät und darf nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden. Fragen Sie Ihren Arzt nach Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten.

Der TEXIBLE Wisbi Sender muss so unter oder neben dem Bett platziert werden, dass keine Gefahr vom Kabel ausgehen kann.

Hinweise für das Pflegepersonal

TEXIBLE Wisbi ist eine Unterstützung für das Pflegepersonal und kann dieses nicht ersetzen.

Vor jedem Einsatz ist TEXIBLE Wisbi auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Eine konstante Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Wartung und Fehlersuche

TEXIBLE Wisbi ist, bis auf den Batteriewechsel, wartungsfrei. Schraube am Batteriefach nur leicht anziehen.

Sollte die Funktion eingeschränkt sein, sind folgende Schritte zu prüfen:

- Ist die Betteinlage korrekt angeschlossen und der Sender eingeschaltet?
- Ist der TEXIBLE Wisbi Sender mit dem WLAN gekoppelt?
- Ist die Senderbatterie in Ordnung?
- Ist die Betteinlage in Ordnung?

Sind die erwähnten Punkte erfüllt, aber die Funktion trotzdem noch eingeschränkt, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal.

Hinweis: Der TEXIBLE Wisbi Sender und der mitgelieferte QR-Code bilden ein verschlüsseltes Rufsystem. Bewahren Sie den QR-Code sicher auf und schützen Sie diesen vor Missbrauch. Somit wird sichergestellt, dass nur Sie Zugriff auf die Informationen Ihres TEXIBLE Wisbi Systems haben.

Achten Sie auf eine ungehinderte Funkverbindung. Vermeiden Sie die Montage in einem Verteilerkasten, Gehäusen aus Metall oder in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten.

ACHTUNG: Die TEXIBLE Wisbi APP kann nicht auf die Grundeinstellungen des Mobiltelefons zugreifen. Beachten Sie daher, dass kein akustischer Alarm im lautlos Modus des Telefons erklingt. Überprüfen Sie daher vor jedem Gebrauch die Toneinstellungen des mobilen Geräts.

Beim mobilen Gerät müssen Push-Benachrichtigungen aktiviert sein. Dies können Sie testen indem Sie Ihr mobiles Gerät in den Standby-Modus setzen und einen Funktionstest durchführen.

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. PACKUNGSGEHALT

Die Verpackung enthält:

- 1x TEXIBLE Wisbi®-Betteinlage
- 1x TEXIBLE Wisbi®-Sender (2,4GHz 802.11b/g/n, WPA/WPA2 PSK)
- 1x Individueller QR-Code für TEXIBLE Wisbi App

2. ANWENDUNGSBEREICH UND FUNKTION

TEXIBLE Wisbi ist die innovative Betteinlage, die sich durch die selbstständige Alarmierung beim erkennen von Nässe bzw. Körperflüssigkeiten auszeichnet und gleichzeitig die Bettanwesenheit erkennt.

Das Sensortextil kommt in unterschiedlichsten Anwendungen in der Pflege wie beispielsweise Senioren- und Pflegeheimen oder für betreutes Wohnen sowie der Angehörigenpflege zum Einsatz. Die dort notwendige Pflege, sowie die Inkontinenzversorgung und die Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Bewohnern stellt für alle beteiligten Personen einen erhöhten Pflegeaufwand dar. TEXIBLE Wisbi bietet hier die richtige Unterstützung. Das System ermöglicht ein optimales Hautklima und minimiert die Gefahr des Weglaufens.

3. INBETRIEBNAHME TEXIBLE WISBI

Der TEXIBLE Wisbi Sender ist mit einem WLAN Modul WPA/WPA2 PSK (2,4GHz 802.11b/g/n) ausgestattet und wird in Ihr Heimnetzwerk eingebunden.

Zusammen mit der TEXIBLE Wisbi App, auf Ihrem mobilen Gerät, ergibt sich Ihr persönliches Rufsystem. Alle 4 Sekunden wird eine Messung durchgeführt. Beim Erkennen einer nassen Betteinlage oder Verlassen des Bettes wird via WLAN und Internetverbindung ein Alarm an Ihr mobiles Gerät gesendet, welches akustisch alarmiert.



1. APP HERUNTERLADEN:

Laden Sie die App „TEXIBLE Wisbi“ auf Google Play oder im App Store herunter. Starten Sie die App und folgen Sie der Anleitung.

2. **QR-CODE EINLESEN:** Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des TEXIBLE Wisbi Senders mit der TEXIBLE Wisbi App um den Sender mit Ihrer App zu koppeln.

3. **BATTERIEN EINLEGEN:** Legen Sie drei Mignon Batterien (AA) in das Batteriefach. Bei korrektem einlegen der Batterien blinkt die weiße LED kurz auf.

Schalten Sie den TEXIBLE Wisbi Sender durch einmaliges Drücken der Taste  ein. Die LED blinkt kurz weiß.

4. **ANSCHLUSS BETTEINLAGE:** Platzieren Sie die Betteinlage als oberste Lage auf dem Leintuch. Weiße Baumwollseite oben, blaue Seite unten. Anschließend befestigen Sie den Sender über die Druckknöpfe mit der Betteinlage. (Siehe Bild)



5. **WLAN EINRICHTUNG:** Sie haben zwei Möglichkeiten Ihren Wisbi Sender mit dem WLAN zu verbinden:

1 MIT DEM WPS / WIFI KNOPF AN IHREM ROUTER:



Drücken Sie die Taste  4 mal innerhalb von 5 Sekunden (LED blinkt weiß) und drücken Sie innerhalb von 5 Minuten den WPS Knopf an Ihrem WLAN Router.

Der TEXTIBLE Wisbi Sender verbindet sich nun automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk. Ist die Verbindung OK leuchtet die weiße LED 3 Sekunden lang durchgehend.

Nach erfolgreicher Kopplung kann es bis zu 30 Sekunden dauern bis die Statusmeldung in der App aktualisiert wird.

Zukünftig verbindet sich der Sender automatisch, auch nach dem Ein-/Ausschalten, mit Ihrem Heimnetzwerk.

2 MANUELL VERBINDEN MIT WLAN NAME UND PASSWORT



Drücken Sie die Taste  6 mal innerhalb von 5 Sekunden (LED blinkt rot).

Öffnen Sie die WLAN Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät und verbinden Sie sich mit dem WLAN „Wisbi“.

Tragen Sie nun innerhalb von 5 Minuten in der App die Informationen (SSID/WLAN Name und Passwort) des Heimnetzwerks ein.

Der TEXTIBLE Wisbi Sender verbindet sich nun automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk. Ist die manuelle Verbindung OK leuchtet die rote LED 3 Sekunden lang durchgehend.

6. **SENSOR EINSTELLUNGEN:** Konfigurieren Sie das System, wie beispielsweise die verzögerte Alarmierung beim Verlassen des Betts, individuell nach Ihren Bedürfnisse in den Einstellungen.

4. FUNKTIONSTEST

Vor jedem Einsatz ist TEXTIBLE Wisbi auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Schalten Sie den TEXTIBLE Wisbi Sender ein. Drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang, bis die orange LED blinkt. Nun führt der TEXTIBLE Wisbi Sender einen Funktionstest der Elektronik durch und setzt eine Alarmmeldung ab.

5. QUITTIEREN VON ALARMEN



Bei einer Alarmierung erscheint eine Statusmeldung im Drop-Down Menü auf Ihrem mobilen Gerät.

Um diesen Alarm zu bestätigen müssen Sie auf diese Statusmeldung tippen. Ansonsten wiederholt sich der Alarm alle 30 Sekunden.

6. AUSSCHALTEN

Wurde der TEXTIBLE Wisbi Sender in Betrieb genommen befindet sich dieser im Standby-Betrieb und führt alle 4 Sekunden eine Messung durch. Wird der Sender nicht verwendet, kann er durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste  ausgeschaltet werden, die LED leuchtet dabei rot. Durch einmaliges Drücken der Taste , wird der Sender wieder eingeschaltet.


7. BETRIEB UND EINSTELLUNGEN APP

Wenn sich Ihre betreute Person mindestens 10 Sekunden lang auf der TEXTIBLE Wisbi Betteinlage befindet wird die Belegungserkennung aktiviert. In den Einstellungen der App können Sie auch eine Verzögerung, bis zu 15min, einstellen. Beispielsweise kann Ihre betreute Person somit selbstständig das Bad aufsuchen. Ein Alarm wird erst nach Überschreiten dieser Zeit, wenn das Bett nicht wieder belegt wird, abgesendet.

Sie können Alarime aktivieren und stummschalten. Wichtig ist, dass Ihr mobiles Gerät sich nicht im Lautlos-Modus befindet.

8. BATTERIEWECHSEL SENDER

Rückseitige Abdeckung des Batteriefachs durch Lösen der Schraube öffnen. Drei Mignon Batterien (AA) in das Batteriefach, wie abgebildet, einlegen und Abdeckung wieder schließen.

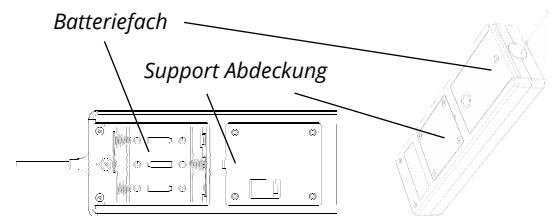

9. BEDIENKONZEPT

Funktion	Taste	LED Anzeige
TEXIBLE Wisbi Sender einschalten	 1 x drücken	weiss blinken
TEXIBLE Wisbi Sender ausschalten	 3sek drücken	rot leuchten
Funktionstest	 3sek drücken	orange blinken
WPS WLAN koppeln	 4 x drücken	weiss blinken (verbunden: Dauerleuchten)
WLAN manuell einrichten	 6 x drücken	rot blinken (verbunden: Dauerleuchten)
Alarm		orange blinken
Batteriestand niedrig		rot & orange abwechselnd blinken
Error		rot leuchten

10. ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgen Sie den TEXIBLE Wisbi Sender mit den dazugehörigen Batterien bei einer geeigneten Sammelstelle. Die TEXIBLE Wisbi Betteinlage kann im Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zu den für Sie erreichbaren Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem Abfallentsorger oder dem für Sie zuständigen Vertreter.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den Sammelbehältern für Pappe, Papier und Kunststoffe.



11. GEWÄHRLEISTUNG

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.



12. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

TEXIBLE GmbH, Schwefelbadstrasse 2, A-6845 Hohenems

Es wurden folgende Richtlinien eingehalten:

EMC 2014/30/EU, RED 2014/53 EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

13. KUNDENDIENST

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

14. TECHNISCHE DATEN TEXIBLE WISBI

Größe	64 x 100cm
Gewicht	250g
Wasseraufnahme	bis zu 700ml/m ²
Auslösemenge	10ml
Min. Körpergewicht (für Belegungserkennung)	45kg
Material	67% Baumwolle 30% Polyester 3% Polyurethan
Waschanweisung	
Spannungsversorgung	3xAA Mignon Batterien, LR6 -----
Leistung	1,3mW
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 bis +55°C
Batterielebensdauer	Je nach Anwendung ca. 1 Jahr
WLAN Verbindung	2,4GHz 802.11b/g/n WPA/WPA2 PSK

SAFETY INFORMATION

Please carefully read through these instructions before using the device! TEXIBLE GmbH assumes no liability for material damages and personal injuries that arise due to non-observance of the operating instructions and especially the safety information!

TEXIBLE Wisbi® is not a medical device and must not be used to diagnose or treat illnesses. Ask your doctor for prevention, diagnosis and treatment of illnesses.

The TEXIBLE Wisbi transmitter must be placed under or next to the bed in a way that there is no danger for the patient through the cable.

Note for care workers

TEXIBLE Wisbi is a support aid for care workers and does not serve as a replacement. TEXIBLE Wisbi must be checked for functionality before each use. A constant internet connection is required.

Maintenance and troubleshooting

TEXIBLE Wisbi is free of maintenance except when the battery needs replacement. Only tighten the screws on the battery compartment slightly.

The following steps should be considered if the function is restricted:

- Is the bed pad correctly connected and the transmitter switched on?
- Is the TEXIBLE Wisbi transmitter connected with the WLAN?
- Is the transmitter battery functioning?
- Is the bed pad free of defects?

If the mentioned points are fulfilled, but the function is still limited, please contact the technical staff.

Note: The TEXIBLE Wisbi transmitter and the included QR code form an encrypted paging system. Keep the QR code secure and protect it from misuse. This ensures that only you have access to the information of your TEXIBLE Wisbi system.

Make sure that the radio link is unobstructed. Do not mount in distribution boxes, metal enclosures or close to large metal objects.

ATTENTION: The TEXIBLE Wisbi App cannot access the basic settings of your mobile device. Note, therefore, that no audible alarm sounds in the silent mode of the mobile device. Check the sound settings of the mobile device before each use.

The mobile device requires push notifications. You can test this by putting your mobile device into standby mode and performing a functional test.

USER MANUAL



1. PACKAGE CONTENTS

The package contents:

- 1x TEXIBLE Wisbi®-Bed Pad
- 1x TEXIBLE Wisbi®-Transmitter (2,4GHz 802.11b/g/n, WPA/WPA2 PSK)
- 1x Unique QR-Code for TEXIBLE Wisbi App

2. SCOPE OF APPLICATION AND FUNCTION

TEXIBLE Wisbi is the innovative nursing care product that stands out for its ability to automatically signal an alarm when moisture, body fluids or a bed exit are detected.

The sensor textile is used in a wide variety of nursing applications, such as senior and nursing homes, assisted living and family care. The necessary basic care, as well as the incontinence care and the supervision of demented and fall-endangered residents represents an increased care effort for all persons involved.

TEXIBLE Wisbi offers the right support here. The system allows an optimal skin climate and minimizes the risk of running away.

3. PUTTING TEXIBLE WISBI INTO OPERATION

The TEXIBLE Wisbi transmitter is equipped with a WLAN module WPA/WPA2 PSK (2,4GHz 802.11b/g/n) and is integrated into your home network.

Together with the TEXIBLE Wisbi App on your mobile device you have your personal call system. Every 4 seconds a measurement is carried out.

When detecting a wet bed pad or a bed exit, an alarm is sent to your mobile device via WLAN and an active Internet connection and you receive an acoustic alarm.

1. DOWNLOAD THE APP:



Download the App „TEXIBLE Wisbi“ from the Google Play or the App Store. Start the App and follow the manual.

2. **SCAN THE QR CODE:** Scan the QR code on the back of the TEXIBLE Wisbi transmitter with the TEXIBLE Wisbi App to pair the transmitter with your app


3. **INSERT BATTERIES:** Insert three mignon batteries (AA) into the battery compartment. When the batteries are inserted correctly, the white LED flashes briefly. Switch the TEXIBLE Wisbi transmitter on through pressing the button  once. The LED flashes whit briefly.

4. **CONNECTION BED PAD:** Place the bed pad as the top layer on the sheet. White cotton side up, blue side down. Then fasten the **TEXTILE Wisbi** transmitter using the push buttons with the bed pad. (See image below)



5. **WLAN PAIRING:** There are two ways to connect your Wisbi transmitter with your WLAN:

1 WITH THE WPS/WIFI BUTTON ON YOUR ROUTER:

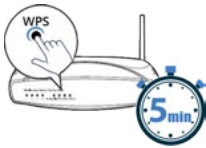

Press the button  4 times within 5 seconds (LED flashes white) and then within 5 minutes press the WPS button on your WLAN router.

The TEXTIBLE Wisbi Sender now automatically connects to your home network. If the connection is OK, the white LED glow for 3 seconds.

After successful pairing, it can take up to 30 seconds until the status message in the app is updated.

In the future, the transmitter will automatically connect to your home network after you turn it off and on again.

2 ENTER YOUR WLAN NAME AND PASSWORD MANUALLY



Press the key  6 times within 5 seconds (LED flashes red).

Open the WLAN settings on your mobile device and connect to WLAN „Wisbi“.

Now enter within 5 minutes the information (SSID / WLAN name and Password) of your home network in the app.

The TEXTIBLE Wisbi Sender now automatically connects to your home network. If the manual connection is OK the red LED glow continuously for 3 seconds.

6. **SENSOR SETTINGS:** Configure the settings of the system, such as the delayed alert when leaving the bed, to suit your individual care needs.

4. FUNCTIONAL TEST

TEXTILE Wisbi must be checked for proper functioning before each use. Switch on the TEXTILE Wisbi transmitter. Press the button  for 3 seconds until the orange LED flashes. This will lead to a functional test of the electronics and sends an alarm.

5. ACKNOWLEDGE ALARMS



When an alarm is triggered, a status message appears in the drop-down menu on your mobile device. To confirm this alarm you have to tap on this status message. Otherwise the alarm repeats every 30 seconds.

6. SWITCH OFF

Once TEXTIBLE Wisbi is switched on it is constantly in standby mode and measures every 4 seconds. If the transmitter is not used, it can be switched off by pressing the button  for 3 seconds to preserve the batteries. The LED glows red. By pressing the button  again once, the transmitter is switched on again.

7. OPERATION AND SETTINGS APP


If your supervised person is lying on the **TEXIBLE Wisbi** bed pad for at least 10 seconds, occupancy detection will be activated.

In the settings of the App you can also set a delay up to 15min. For example, your supervised person can independently go to the bathroom. An alarm will be sent only after this time runs up and the person did not go back to bed.

You can enable and silence alarms. Important is, that your mobile device is not in silent mode.

8. CHANGING BATTERIES OF TRANSMITTER

Open the rear cover of the battery compartment by loosening the screw. Insert three mignon batteries (AA) into the battery compartment as shown and close the cover again.

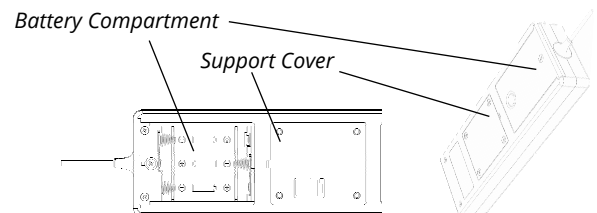

9. OPERATING CONCEPT

Function	Button	LED Display
Switching TEXIBLE Wisbi Transmitter ON	 Press 1 x	flashing white
Switching TEXIBLE Wisbi Transmitter OFF	 Press 3 sec	glowing red
Functional test	 Press 3 sec	flashing orange
Linking WPS WLAN	 Press 4 x	flashing white (connected: constant light)
Manual WLAN setup	 Press 6 x	flashing red (connected: constant light)
Alarm		flashing orange
Battery low		red & orange flash alternately
Error		glowing red

10. DISPOSAL INFORMATION

Dispose the TEXIBLE Wisbi transmitter with accompanying batteries at a designated collection point.

The TEXIBLE Wisbi bed pad can be disposed in household waste. Please contact your waste disposal company or the representative for more information about nearby collection points.

Dispose of the packaging material in the collection containers for cardboard, paper and plastics.



11. WARRANTY

We rectify any device defects due to material or manufacturing faults by repair or replacement free of charge within the statutory warranty period. The warranty expires in the case of intervention by third parties.



12. EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:
TEXIBLE GmbH, Schwefelbadstrasse 2, 6845 Hohenems, Austria

The following guidelines have been complied with:
EMC 2014/30/EU, RED 2014/53 EU, LVD 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU

The declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

13. CUSTOMER SERVICE

Please contact the manufacturer or your dealer if malfunctions still occur despite proper handling or if the device has been damaged.

14. TECHNICAL DATA TEXIBLE WISBI

Size	64 x 100cm
Weight	250g
Water absorption	up to 700ml/m ²
Trigger quantity	10ml
Minimal body weight (for occupancy detection)	45kg
Material	67% Cotton 30% Polyester 3% Polyurethane
Wash resistance	    
Power supply	3xAA mignon batteries, LR6 
Power	1,3mW
Protection class	IP40
Ambient temperature	0 to +55°C
Battery life	1 year depending on application
WLAN Connection	2,4GHz 802.11b/g/n WPA/WPA2 PSK

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent mode d'emploi. Nous récusons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant du non-respect du manuel d'utilisation et notamment des consignes de sécurité!

TEXIBLE Wisbi® n'est pas un appareil médical et ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter une maladie. Demandez à votre médecin pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

Le transmetteur TEXIBLE Wisbi doit être placé sous ou à côté du lit de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger pour le patient à travers le câble.

Instructions pour le personnel soignant

TEXIBLE Wisbi est un support pour le personnel soignant et ne peut pas le remplacer. Avant chaque utilisation, le bon fonctionnement du système TEXIBLE Wisbi doit être vérifié. Une connexion Internet permanente est nécessaire.

Maintenance et recherche d'erreurs

TEXIBLE Wisbi ne nécessite aucun entretien, sauf pour le remplacement de la batterie. Serrez légèrement la vis du compartiment de la batterie.

Si la fonction est restreinte, les étapes suivantes doivent être vérifiées:

- L'alèse est-il correctement connecté et l'émetteur allumé?
- L'émetteur TEXIBLE Wisbi est-il connecté au WLAN?
- La batterie de l'émetteur est-elle en bon état?
- Est-ce que l'alèse en ordre?

Si les points mentionnés sont remplis, mais que la fonction est encore limitée, veuillez contacter le personnel technique.

Remarque: L'émetteur TEXIBLE Wisbi et le code QR inclus forment un système crypté. Gardez le code QR sécurisé et protégez-le contre toute utilisation abusive. Cela garantit que vous seul avez accès aux informations de votre système TEXIBLE Wisbi.

Faites attention à une connexion sans fil non obstruée. Évitez de monter dans une boîte de distribution, des boîtiers métalliques ou à proximité de grands objets métalliques.

ATTENTION: L'application TEXIBLE Wisbi ne peut pas accéder aux paramètres de base de votre appareil mobile. Notez, par conséquent, qu'aucune alarme sonore ne retentit dans le mode silencieux de l'appareil mobile. Vérifiez les paramètres sonores de l'appareil mobile avant chaque utilisation.

L'appareil mobile nécessite des notifications push. Vous pouvez tester cela en mettant votre appareil mobile en mode veille et en effectuant un test fonctionnel.

MODE D'EMPLOI



1. CONTENU DU PAQUET

L'emballage contient:

- 1x TEXIBLE Wisbi®-Alèse pour le lit
- 1x TEXIBLE Wisbi®-Émetteur (2,4GHz 802.11b/g/n, WPA/WPA2 PSK)
- 1x Code QR individuel pour App TEXIBLE Wisbi

2. DOMAINE D'UTILISATION ET FONCTIONNALITÉS

TEXIBLE Wisbi est un produit innovant de soins infirmiers qui se distingue par sa capacité à signaler automatiquement une alarme lorsque de l'humidité, des liquides organiques ou une sortie de lit sont détectés.

Le textile du capteur est utilisé dans une grande variété d'applications de soins infirmiers, tels que les maisons de retraite et de soins infirmiers, la vie assistée et les soins familiaux. Les soins de base nécessaires, ainsi que la prise en charge de l'incontinence et la surveillance des personnes démotivées et en danger d'extinction représentent un effort de soins accru pour toutes les personnes impliquées.

TEXIBLE Wisbi offre le bon support ici. Le système permet un climat cutané optimal et minimise le risque de fuite.

3. MISE EN SERVICE DU TEXIBLE WISBI

L'émetteur TEXIBLE Wisbi est équipé d'un module WLAN WPA/WPA2 PSK (2,4GHz 802.11b/g/n) et est intégré dans votre réseau domestique.

Avec l'application TEXIBLE Wisbi sur votre appareil mobile, vous avez votre système d'appel personnel. Toutes les 4 secondes, une mesure est effectuée. Lors de la détection d'un coussin de lit humide ou d'une sortie de lit, une alarme est envoyée à votre appareil mobile via une connexion WLAN et Internet et vous recevez une alarme sonore.



1. TÉLÉCHARGER L'APP:

Téléchargez l'application „TEXIBLE Wisbi“ à partir de Google Play ou de l'App Store. Lancez l'application et suivez le manuel.

2. **NUMÉRISER LE CODE QR:** Scannez le code QR à l'arrière de l'émetteur TEXIBLE Wisbi avec l'application TEXIBLE Wisbi pour coupler l'émetteur avec votre application.

3. **INSÉRER BATTERIES:** Insérez trois piles Mignon (AA) dans le compartiment à piles. Lorsque les piles sont insérées correctement, la LED blanche clignote brièvement. Allumez l'émetteur TEXIBLE Wisbi en appuyant une fois sur le bouton . La LED blanche allumée.

4. CONNEXION L'ALÈSE:

Placez l'alèse comme la couche supérieure sur le lit. Côté coton blanc vers le haut, côté bleu vers le bas. Fixez ensuite l'émetteur à l'aide des boutons poussoirs avec l'alèse. (Voir photo)



5. CONNEXION WLAN: Il existe deux façons de connecter votre émetteur Wisbi à votre WLAN:

1 AVEC LE BOUTON WPS/WIFI SUR VOTRE ROUTEUR:



Appuyez sur le bouton  4 fois en 5 secondes (LED clignote en blanc) et puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur WLAN dans les 5 minutes.

Le TEXIBLE Wisbi Sender se connecte maintenant automatiquement à votre réseau domestique. Si la connexion est correcte, de La LED blanche s'allume pendant 3 secondes.

Après un couplage réussi, cela peut prendre jusqu'à 30 secondes jusqu'à ce que le message de l'application soit mis à jour.

À l'avenir, l'émetteur se connectera automatiquement à votre réseau domestique même après la mise sous / hors tension.

2 ENTREZ LES INFORMATIONS WLAN MANUELLEMENT



Appuyez sur le bouton  6 fois en 5 secondes (la LED clignote en rouge).

Ouvrez les paramètres WLAN sur votre appareil mobile et connectez-vous au WLAN „Wisbi“.

Entrez maintenant les informations (nom SSID / WLAN et Mot de passe) du réseau domestique dans l'application dans les 5 minutes.


Le TEXIBLE Wisbi émetteur se connecte maintenant automatiquement à votre réseau domestique. La connexion manuelle est-elle correcte, la LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

6. RÉGLAGE DU CAPTEUR: Configurez le système dans les paramètres, tel que l'alerte retardée en quittant le lit, pour répondre à vos besoins.

4. TEST DE FONCTION

Avant chaque utilisation, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du TEXIBLE Wisbi. Allumez l'émetteur TEXIBLE Wisbi. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED orange clignote. L'émetteur TEXIBLE Wisbi effectue maintenant un test de fonctionnement de l'électronique et émet un message d'alarme.

5. ACQUITTEMENT DES ALARMES

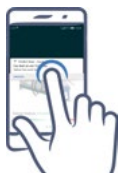

Lorsqu'une alarme est déclenchée, un message d'état apparaît dans le menu déroulant de votre appareil mobile.

Pour confirmer cette alarme, vous devez taper sur ce message d'état. Sinon, l'alarme se répète toutes les 30 secondes.

6. ÉTEINDRE

Si le transmetteur TEXIBLE Wisbi a été mis en service, il est en mode veille et effectue une mesure toutes les 4 secondes. Si l'émetteur n'est pas utilisé, il peut Éteignez le bouton  pendant 3 secondes pour économiser la batterie. La LED allumé en rouge. Appuyez une fois sur le bouton  pour rallumer l'émetteur.


7. FONCTIONNEMENT ET PARAMÈTRES APP

Si votre personne surveillée est sur le lit depuis au moins 10 secondes, la détection de présence est activée. Dans les paramètres de l'application, vous pouvez également utiliser un Réglez le délai, jusqu'à 15min. Par exemple, votre personne supervisée peut indépendamment aller à la salle de bain. Une alarme retentit seulement après cette heure, lorsque le lit n'est plus occupé.

Vous pouvez activer et désactiver les alarmes. Important est que votre appareil mobile n'est pas en mode silencieux.

8. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Ouvrez le couvercle arrière du compartiment de la batterie en desserrant la vis. Insérez trois piles Mignon (AA) dans le compartiment des piles comme indiquer et refermez le couvercle.

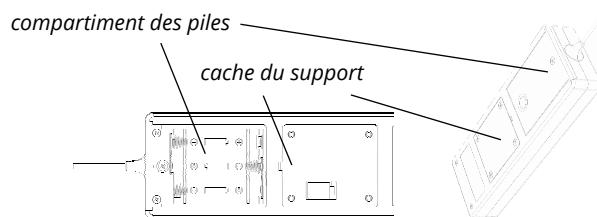

9. CONCEPT DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Bouton	Affichage LED
Activer TEXIBLE Wisbi	 1 x appuyer	clignote blanc
Éteindre TEXIBLE Wisbi	 3s appuyer	allumé rouge
Test de fonction	 3s appuyer	clignote orange
Couplage WLAN avec WPS	 4 x appuyer	clignote blanc (connecté: lumière continue)
Configuration WLAN manuelle	 6 x appuyer	clignote rouge (connecté: lumière continue)
Alarme		clignote orange
Batterie faible		rouge & orange clignote alternativement
Erreur		allumé rouge

10. CONSIGNES D'ÉLIMINATION

Éliminez les TEXIBLE Wisbi – Émetteur avec ses batteries dans un point de collecte approprié. TEXIBLE Wisbi l'alèse peut être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les points de collecte qui peuvent être atteints pour vous, veuillez contacter votre société d'élimination des déchets ou votre représentant.

Éliminez les emballages dans un conteneur de collecte pour carton, papier et plastique.



11. GARANTIE

Pendant la période de garantie, nous éliminons gratuitement, par réparation ou échange, les défauts de l'appareil résultant de vices de matière ou de fabrication. La garantit expire en cas d'intervention de tiers.



12. EG - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant:
TEXIBLE GmbH, Schwefelbadstrasse 2, 6845 Hohenems, Autriche

Produit conforme à la directive:
EMC 2014/30/EU, RED 2014/53 EU, LVD 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU

La déclaration de conformité peut être demandée auprès du fabricant.

13. SERVICE APRÈS-VENTE

Si des défauts surviennent en dépit d'une utilisation conforme, ou si l'appareil a été endommagé, veuillez-vous au fabricant ou à son marchand.

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TEXIBLE WISBI

Taille	64 x 100cm
Poids	250g
Absorption d'eau	Jusqu'à 700ml/m²
Quantité pour le déclenchement	10ml
Poids corporel minimum (pour la détection d'occupation)	45kg
Matériel	67% Coton 30% Polyester 3% Polyuréthane
Instructions de lavage	
Alimentation	3xAA Mignon batteries, LR6 -----
Consommation d'électricité	1,3mW
Protection	IP40
Plage de température	0 à +55°C
Durée de vie des batteries	En fonction de l'application 1 an
Connexion WLAN	2,4GHz 802.11b/g/n WPA/WPA2 PSK

